

HANDLEIDING

Speaksee Microphone Kit



Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Laatste versie is te vinden op <https://speak-see.com/nl/pages/manual>

©Speaksee. Alle rechten voorbehouden.

INHOUD

ONDERDELENOVERZICHT	4
In de doos van de Microphone Kit	4
Sticker op de doos	5
Speaksee Microfoons	5
Oplaadstation	6
Oplaad Accessoires	7
INSTALLATIE	8
Volg de stappen van de Quickstart Card	8
Volg de stappen van de Speaksee App	9
DAGELIJKS GEBRUIK	15
Zet de Microphone Kit aan	16
Het dragen van de microfoons	18
Ondertitelen van gesprekken	19
Herkennen van de batterij status	19
De Microphone Kit uitzetten	20
De Microphone Kit opladen	22
Software updates	23
App updates	23
INSTELLINGEN AANPASSEN	24
Leesbaarheid aanpassen	24
Vertalen	25
Extra Wi-Fi-netwerken toevoegen	26
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	29
Legenda van oplaadstation lampjes	29
Legenda van het microfoon lampje	32
Legenda aan/uit-knop bediening	34
Apparaat Informatie delen	34
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	38
TECHNISCHE SPECIFICATIES	39
JURIDISCHE INFORMATIE	40
Privacybeleid	40
Regelgeving Informatie	40
Belangrijk advies	42

Voorzorgsmaatregelen	42
CONTACTGEGEVENS	44

ONDERDELEN OVERZICHT

In de doos van de Microphone Kit



De Speaksee Microphone Kit bevat de volgende onderdelen en accessoires:

- 1 x Oplaadstation
- 3 x Microfoon
- 9 x Kleurenpuuk
- 3 x Nekkoord
- 1 x Internationale adapter
- 1 x USB-C kabel
- 1 x Opbergetui

Samen met de volgende afgedrukte documentatie:

- Quickstart Card
- Gebruiksaanwijzing
- Legal Information Card

Optioneel meegeleverde accessoires:

- 1 x Wi-Fi Hotspot


Sticker op de doos

De sticker op de doos bevat informatie met betrekking tot je Microphone Kit.

- MAC (LAN1): verwijst naar het Wi-Fi-MAC-adres.
- MAC (LAN2): verwijst naar het Ethernet MAC-adres.
- SN: is het unieke serienummer van je Microphone Kit, dit is dezelfde code die op de achterkant van het oplaadstation staat afgedrukt.




Speaksee Microfoons

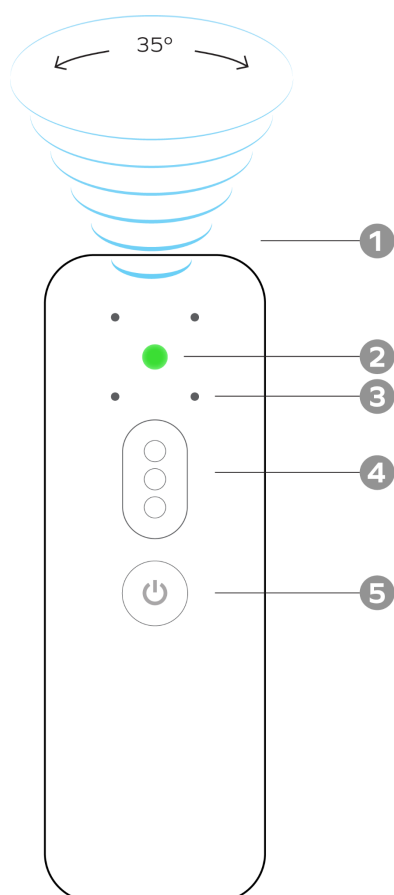

- 1. Gerichte spraakdetectie**
Om de stem op te vangen van de persoon die het draagt.
- 2. Lampje**
Geeft de status van de microfoon aan. Zie de [legenda van het microfoon lampje](#) voor een volledig overzicht.
- 3. Microfoon-ontvangers**
Om direct te luisteren en ondertitelen wat er gezegd wordt.
- 4. Gekleurde puck**
Bij elke Microphone Kit worden negen verschillende kleuren geleverd. LET OP: het veranderen van sprekers kleuren wordt op dit moment nog niet ondersteund.
- 5. Aan/uit-knop**
Nadat je het oplaadstation hebt ingeschakeld, zet je de microfoons aan door op deze aan/uit-knop te drukken.

Oplaadstation

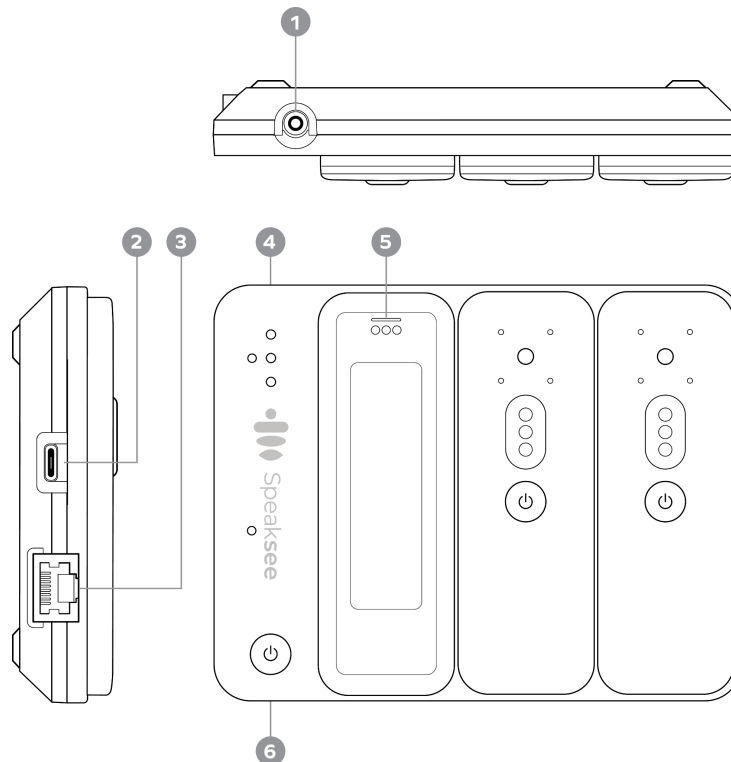

1. Audio-aansluiting

Sluit een apparaat aan waarvan je de audio wilt ondertitelen. Denk hierbij aan je smartphone of je TV. Verbindt deze door middel van een 3.5 mm audiokabel. Let op: Deze functie wordt nog niet volledig ondersteund.

2. USB-C oplaadaansluiting

Gebruik deze aansluiting om je Microphone Kit op te laden.

3. Ethernet-aansluiting

Maak verbinding via een netwerkkabel met deze poort, alternatief voor Wi-Fi. Let op: Deze functie wordt nog niet volledig ondersteund.

4. Lampjes

Om de status van het oplaadstation aan te geven. Zie [de legenda van de oplaadstation lampjes](#) voor een volledig overzicht.

5. Oplaad pinnen


Om de microfoons aan te sluiten op het oplaadstation om ze op te laden.

6. Aan/uit-knop

Druk hierop om het oplaadstation aan te zetten. Zet vervolgens de microfoons afzonderlijk aan.

Oplaad Accessoires

Gebruik voor het opladen van de Microphone Kit uitsluitend de bijgeleverde adapter en kabel.

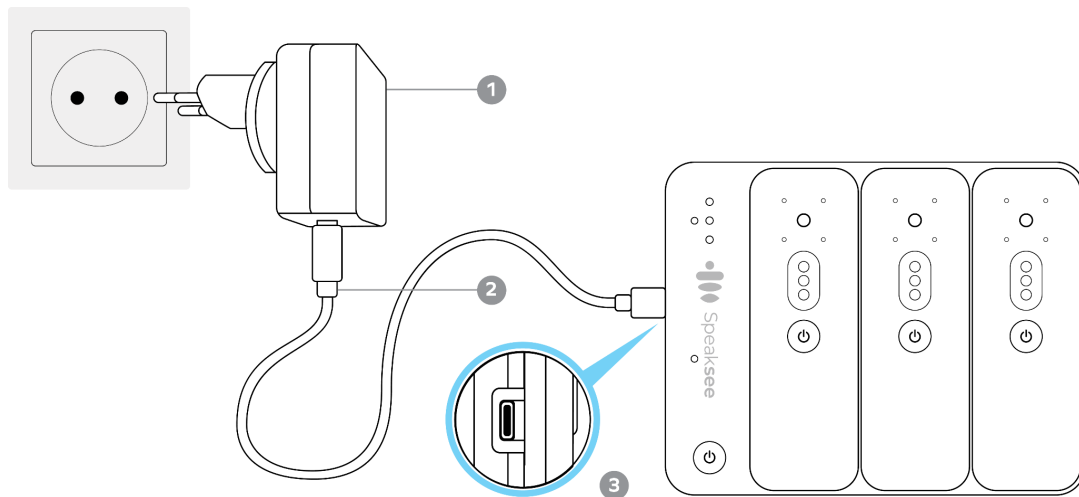

1. Internationale adapter

Verwissel de adapter kop om hem aan te passen aan je stopcontact.

2. USB-C Kabel

Om de adapter aan te sluiten op het oplaadstation.


3. USB-C Ingang

Steek de USB-C-kabel in deze poort van het oplaadstation.

INSTALLATIE

Volg de stappen van de Quickstart Card

In het binnenvak van de opbergetui van de Microphone Kit bevindt zich een op papier afgedrukte snelstart kaart (Quickstart Card). Deze ziet er als volgt uit:

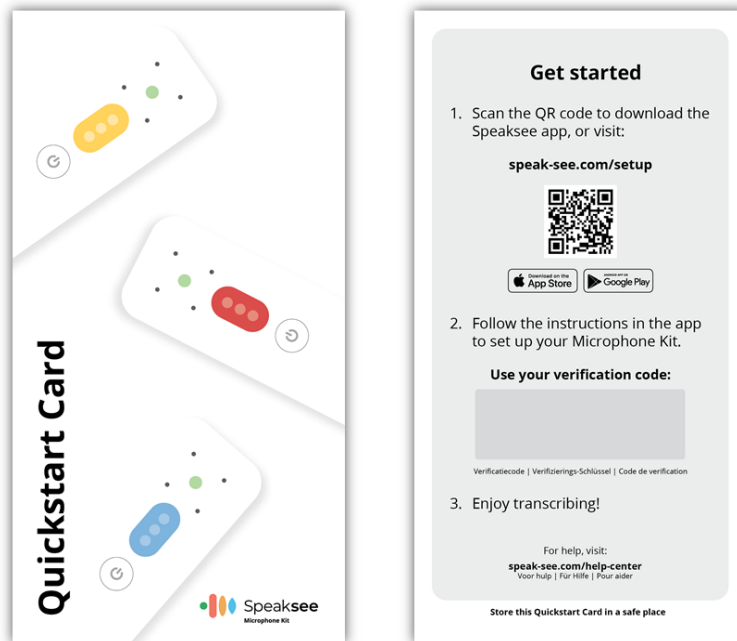

Getoond voorbeeld van productie run 2021

Ga aan de slag door deze 3 stappen te volgen en gebruik de verificatiecode om je apparaat aan te sluiten:

1. Installeer de Speaksee app

Scan de QR-code zoals aangegeven op de Quickstart Card om de Speaksee app te downloaden of ga naar: speak-see.com/setup

2. Stel je Microphone Kit in.

Volg de instructies in de app om je Microphone Kit in te stellen. Je wordt gevraagd om de verificatiecode te gebruiken die op de Quickstart Card staat afgedrukt.

Let op: De verificatiecode kan maar één keer gebruikt worden. Als je Speaksee op een ander apparaat wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je met hetzelfde account inlogt.

3. Veel plezier met ondertitelen!

Volg de stappen van de Speaksee App

1. Maak een account aan

Als je nog geen Speaksee-account hebt, druk dan op de knop "Aan de slag".

Heb je al een account? Dan kan je op "Log In" klikken. Ga verder bij stap 3. Heb je al een AutoCaption account? Dan kun je deze gebruiken om in te loggen.


Vul het volledige formulier in om een Speaksee account aan te maken.

Let op: Speciale tekens zijn niet toegestaan in de naamvelden.

Selecteer bij *Transcriptie taal* de taal waarvoor je de Microfoon Kit wilt gebruiken. Later zullen we een taalswitch toevoegen in de applicatie voor gebruik in andere talen.

Kies je eigen wachtwoord om in te kunnen loggen op je Speaksee account, dit is **NIET** de unieke verificatiecode op de Quickstart card.

Maak een nieuwe account aan of log in als je al een account hebt.

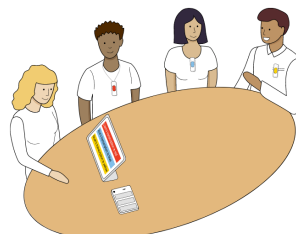

Account aanmaken

Heb je al een account?

LOG-IN

Begin

Voornaam

Achternaam

Email

Bevestig email

Gesprekstaal

Kies je wachtwoord



Bevestig wachtwoord



Door een account aan te maken accepteert je
[de Algemene Voorwaarden](#)

REGISTREER

2. Verifieer je account


Na het aanmaken van een account, ontvang je een e-mail om het account te verifiëren.

Klik op de link in de e-mail en je account zal worden geverifieerd.

Nadat je op de link hebt geklikt, kan je terugkeren naar de app en inloggen met je Speaksee-account.

3. Zet Bluetooth (en locatie) aan

Om de Microphone Kit te kunnen verbinden met je telefoon of tablet, moet Bluetooth aan staan. **Let op: Android gebruikers moeten ook hun locatie inschakelen.**

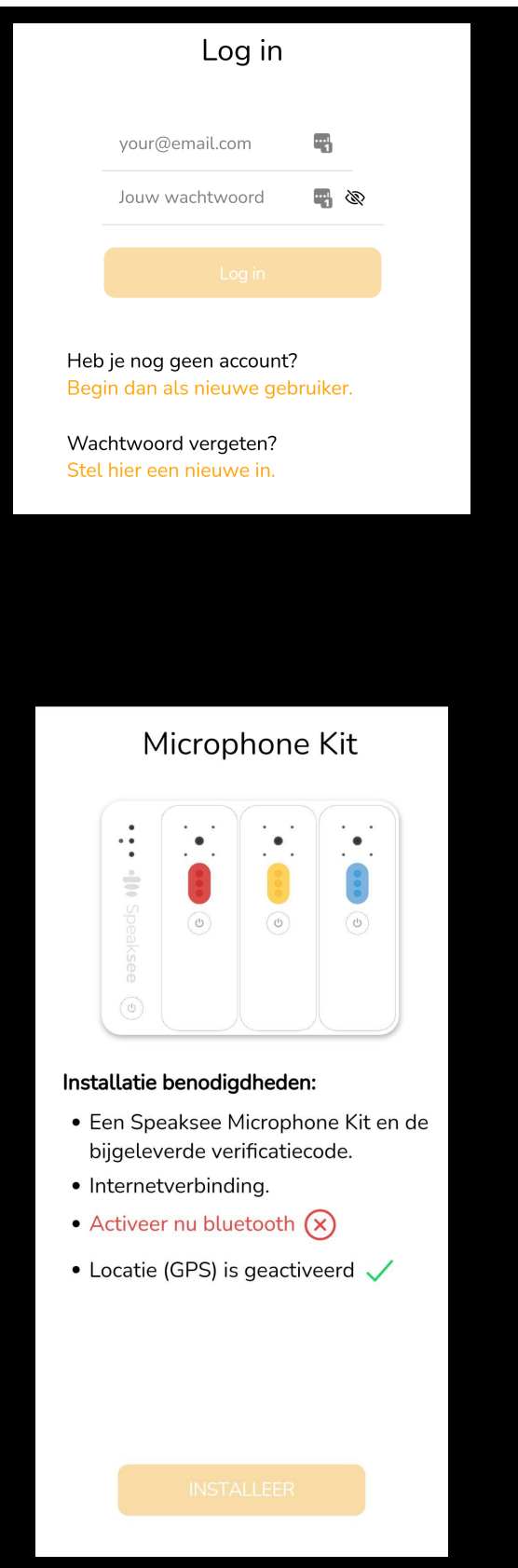

4. Verifieer je Microphone Kit

Vul de unieke verificatiecode in die bij de Speaksee Microphone Kit is geleverd.

Je vindt de verificatiecode op de Quickstart Card in het binnenvak van het opbergetui. Bewaar deze verificatiecode goed. Het kan zijn dat je deze in de toekomst nogmaals nodig hebt.

Let op: De verificatiecode kan maar één keer gebruikt worden. Als je Speaksee op een ander apparaat wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je met hetzelfde account inlogt.

5. Het aanzetten van de Microphone Kit

Klik op de aan/uit-knop van het oplaadstation om de Microphone Kit aan te zetten. Je zult zien dat alle 3 de lampjes 1 maal groen knipperen. Als de lampjes op de Microphone Kit blauw knipperen is het klaar om een bluetooth verbinding op te zetten en kun je op "Volgende" drukken.

Verificatie code


Voer de verificatiecode in, die je kan vinden op de afgedrukte documentatie bij jouw Microphone Kit.

ABCD - ABCD - AB - 123

Aanzetten

Druk de aan/uit-knop van het oplaadstation in totdat de lampjes groen oplichten.

Wacht ongeveer 30 seconden tot de lampjes van het oplaaddock blauw beginnen te knipperen. De Microphone Kit is klaar om een bluetooth verbinding tot stand te brengen.

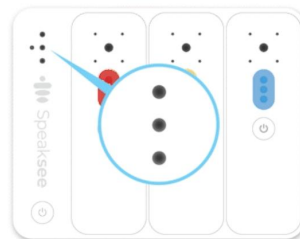

Let op: Het lampje van de microfoon kan wit oplichten, dit betekent dat de microfoon batterij wordt opgeladen.

ZOEKEN >>


6. Koppel de Microphone Kit met je telefoon of tablet

De app is aan het scannen om een verbinding tussen je telefoon en de Microphone Kit tot stand te brengen. Zodra de Microphone Kit met de naam Speaksee is gevonden, kun je op "Verbind" klikken. Je kunt nu op de volgende pagina verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.

7. Verbinden met Wi-Fi

Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee je de Microphone Kit wilt verbinden. Vul de juiste Wi-Fi-gegevens in en druk op "Verbinden".

Kan de app het gewenste netwerk niet vinden? Druk dan op "Opnieuw scannen". Als de app na 3 pogingen nog steeds het netwerk niet kan vinden, neem dan contact op met ons support team.

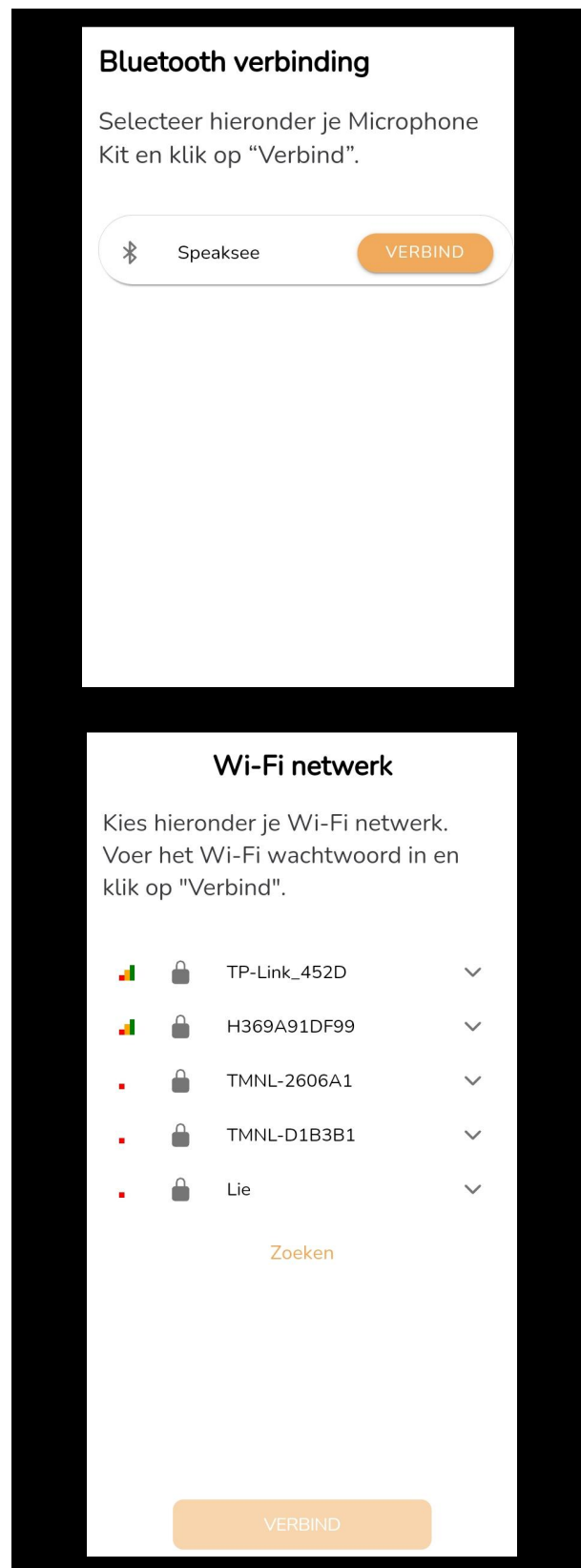


8. Verwijder de beschermende stickers

Verwijder van alle microfoons de beschermende stickers voordat je de Microphone Kit gaat gebruiken. Zodra dit is gebeurd, kun je op "Voltooien" klikken. Je hebt nu met succes de Microphone Kit geïnstalleerd!



9. Klaar voor gebruik


Je bent nu klaar om de Speaksee Microphone Kit te gebruiken. In het volgende hoofdstuk staan instructies over het gebruik van de Microphone Kit.

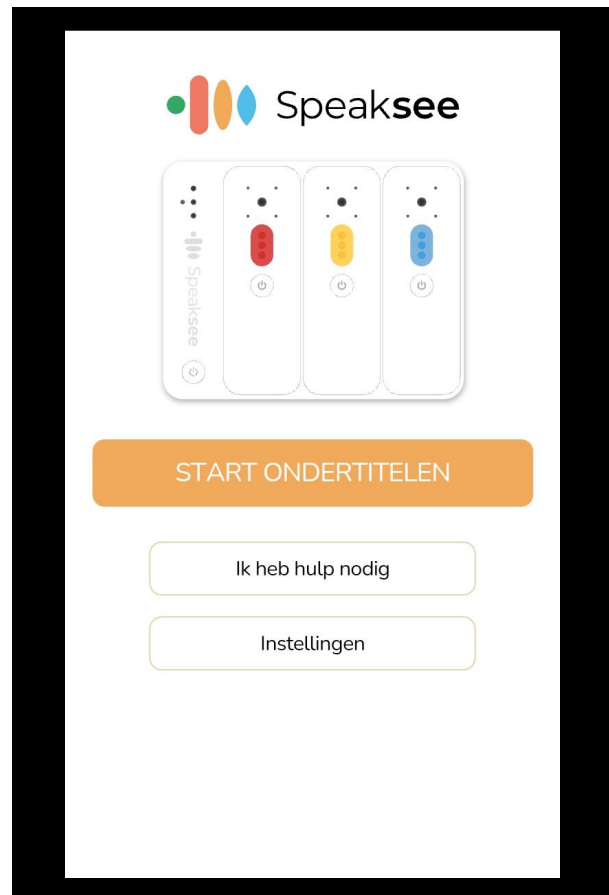

DAGELIJKS GEBRUIK

Deze Speaksee Microphone Kit ondertitelt direct wat mensen zeggen, zelfs in groepen en bij achtergrondgeluid.

Gebruik de Speaksee app op je smartphone, tablet of laptop en bekijk wie wat zegt. De spraak die door elke microfoon wordt opgepikt, wordt in een andere kleur weergegeven.

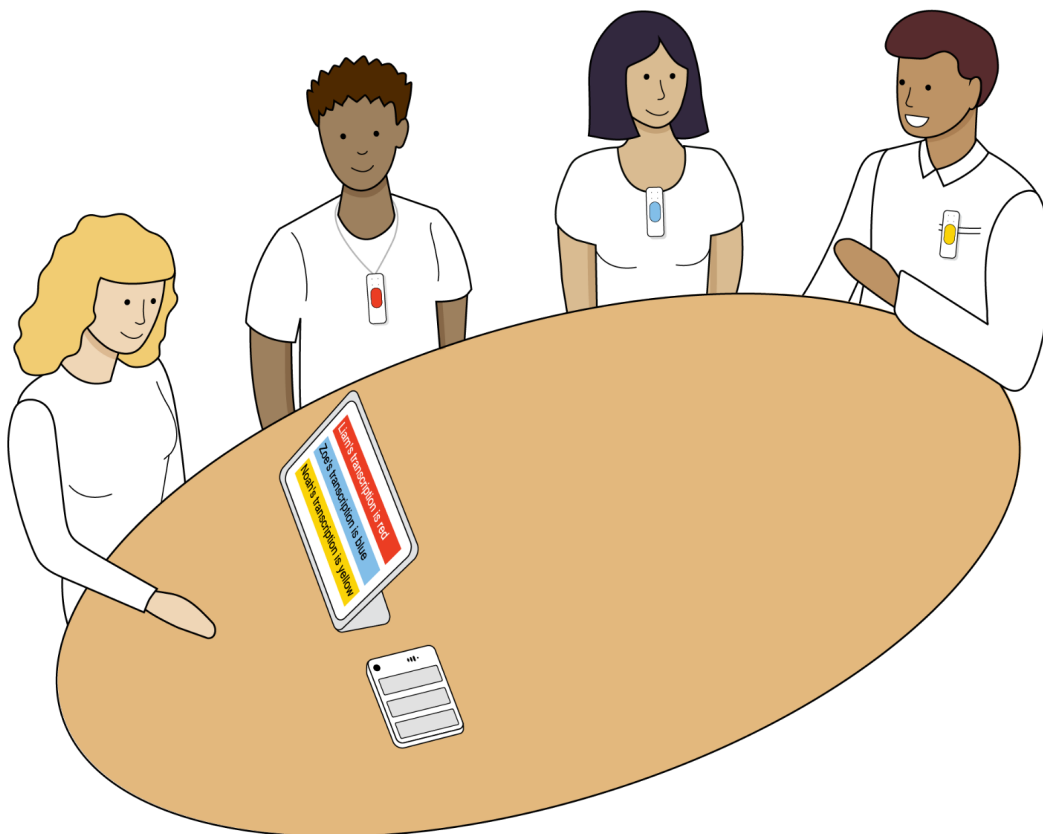

Je gesprekken zijn beveiligd

Voel je vrij om de Microphone Kit in elke omgeving te gebruiken. Jouw transcripties zijn hardware- en software versleuteld. Ook is de veiligheid van de Microfoon Kit op de proef gesteld door een team van IT-deskundigen van KPN. Hier zijn we voor geslaagd.


Zet de Microphone Kit aan

Bij het eerste gebruik dien je je Microphone Kit in te stellen volgens de stappen zoals beschreven in het hoofdstuk "[Installatie](#)". Schakel bij elk gebruik altijd eerst het oplaadstation in, voordat je de microfoons inschakelt.


1. Zet het oplaadstation aan

Voordat je de microfoons inschakelt, schakel je het oplaadstation in door de aan/uit-knop 1 seconde in te drukken.

De lampjes knipperen groen om aan te geven dat het oplaadstation aan het opstarten is. Dit duurt ongeveer 30 seconden, waarbij het controleert op software updates en verbinding maakt met het internet.

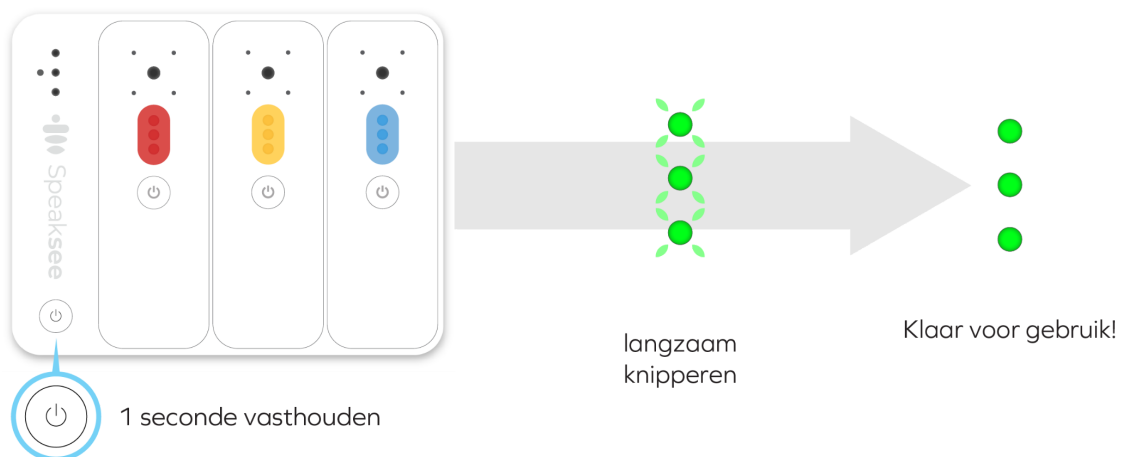

Zodra de lampjes continu groen branden is het oplaadstation klaar voor gebruik. Je kunt nu de microfoons eruit halen.

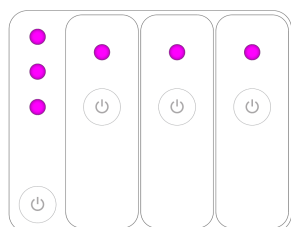


software update wordt uitgevoerd

Let op: Wanneer je het oplaadstation inschakelt, kan er een software-update plaatsvinden. Een software update is te herkennen aan 3 fuchsia lampjes, lees het hoofdstuk [Software updates](#) voor een gedetailleerde uitleg.

2. Zet de Microfoons aan

Zodra het oplaadstation is aangezet, zet je elke microfoon aan door hem uit het oplaadstation te halen en de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt te houden:

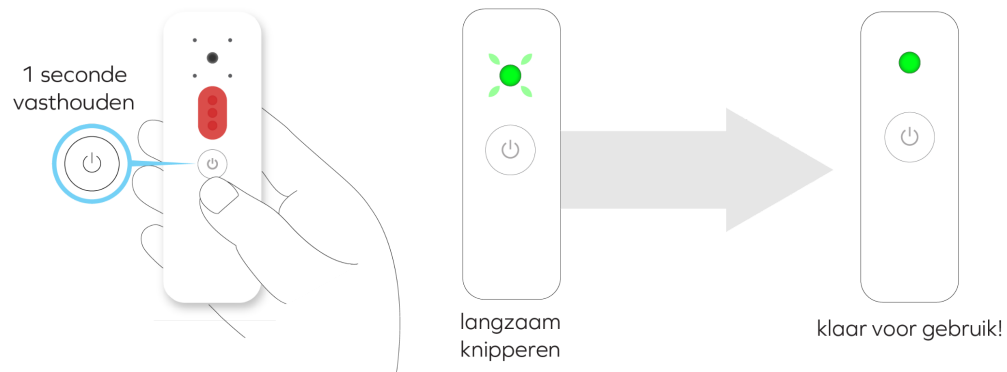


Het lampje knippert groen om aan te geven dat de microfoon aan het opstarten is. Dit duurt ongeveer 5 seconden. Zodra de microfoon continu groen brandt, is de microfoon klaar voor gebruik. Je kunt nu de microfoons uitdelen aan elke spreker.

Het dragen van de microfoons

Elke spreker moet een microfoon dragen om een gesprek zo goed mogelijk te kunnen ondertitelen. Om de stem van de persoon die hem draagt goed op te vangen, is het belangrijk dat de microfoon omhoog wijst in de richting van de mond van de spreker. Ook moet het lampje zichtbaar zijn, naar voren gericht.


Clip

Gebruik de clip voor overhemden met een borstzakje of een lage halslijn.

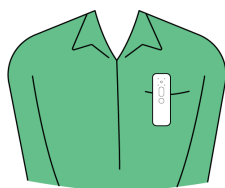



Aan de borstzak
vastgemaakt

Open de clip door lichte druk uit te oefenen en bevestig hem naar wens aan de kleding.

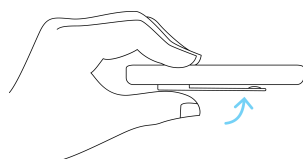

Nekkoord

Voor alle andere kledingstukken bevestigt je het nekkoord aan de microfoon door het magnetische bedeltje aan de achterkant van de microfoon vast te klemmen.

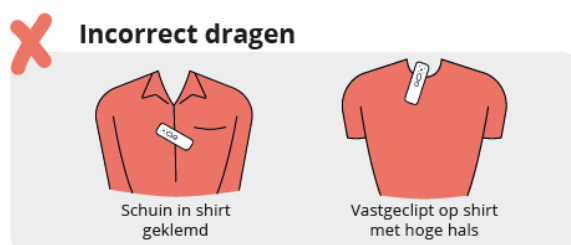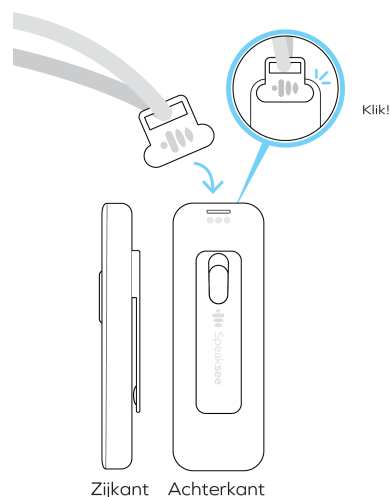


Ondertitelen van gesprekken

De nauwkeurigheid is het best wanneer iedereen in het gesprek duidelijk articuleert en hoorbaar (luid genoeg) spreekt. Het is het beste om alle deelnemers aan het gesprek hierover van tevoren te informeren.


In de app

Zodra de Microphone Kit is ingeschakeld kun je in de app op de knop "Start transcriptie" drukken. Selecteer vervolgens de Microphone Kit in de popup. Elke spreker kan nu beginnen met praten en de ondertiteling verschijnt in de app.

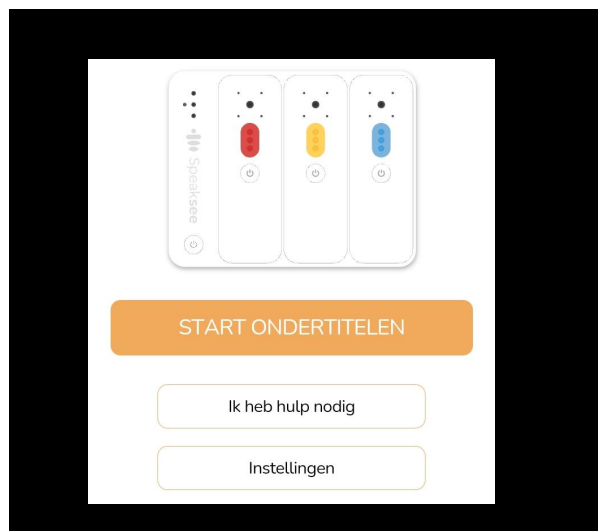

Op de computer via web browser

Wil je de ondertiteling liever op je computer of laptop bekijken? Ga dan naar speak-see.com/web. Log in met je Speaksee account en selecteer de Microphone Kit die je wenst te gebruiken. Elke spreker kan nu beginnen met praten en de transcripties zullen in de app verschijnen.

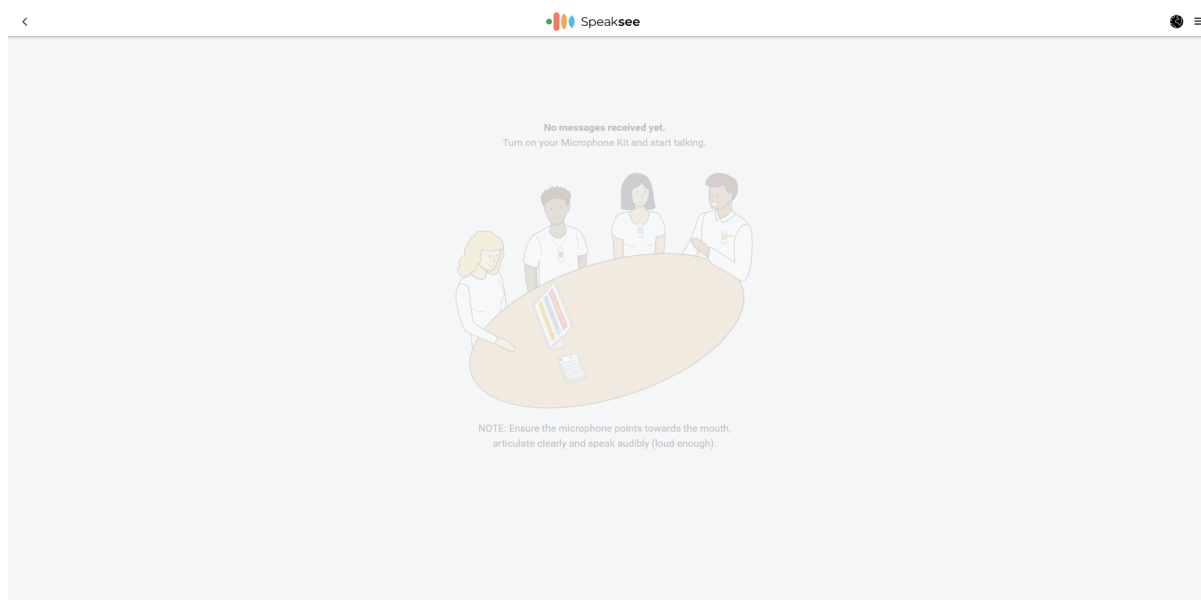


Herkennen van de batterij status

Tijdens het gebruik raakt de batterij van de Microphone Kit langzaam op. Het is goed om je hiervan bewust te zijn, om tijdig te herkennen wanneer de Microphone Kit opgeladen dient te worden.

De gemiddelde gebruikstijd voor elke microfoon is 1 uur en 45 minuten. Dat betekent dat je met een 100% volle batterij een gesprek van 1 uur en 45 minuten kunt voeren totdat de microfoon uitschakelt.

Vol:


Zolang de lampjes in groen branden tijdens het gebruik is de Microphone Kit voldoende opgeladen.

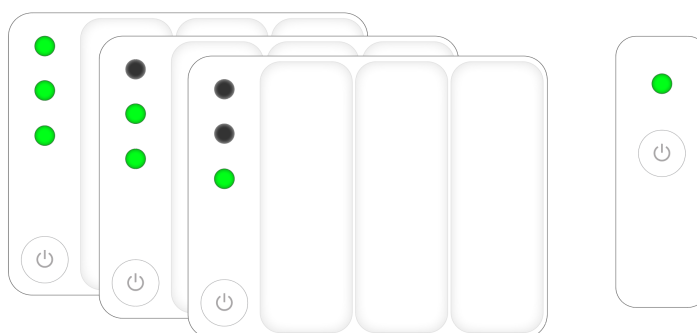

batterij voldoende geladen voor gebruik

Bijna leeg:


Als de batterij bijna leeg is, knippert het lampje afwisselend groen en rood.

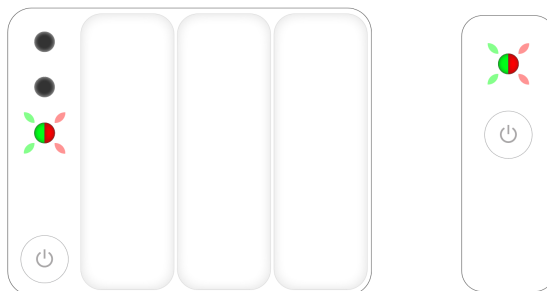

LET OP: batterij bijna leeg!

Batterij te leeg voor gebruik:

In het geval dat er geen oplaad-actie wordt ondernomen, zal de Microphone Kit automatisch uitschakelen naar standby. Dit wordt aangegeven door het 10x knipperen in rood van het lampje.

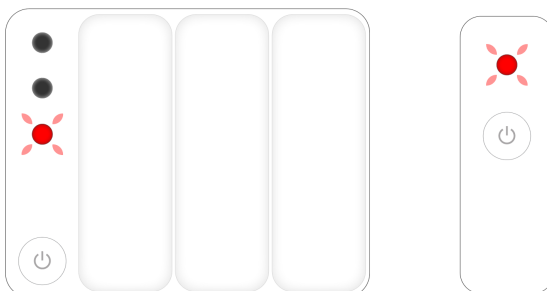

automatische uitschakeling doordat de batterij leeg is


De Microphone Kit uitzetten

1. De microfoons

Voor het uitzetten van de microfoons voldoet het door simpelweg de microfoons terug te plaatsen in het oplaadstation. De microfoons worden dan opgeladen of automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij vol is.

2. Het oplaadstation


Houd de aan/uit-knop van het oplaadstation 1 seconde ingedrukt om het uit te zetten. De lampjes knipperen 1 keer rood, om aan te geven dat het apparaat uitschakelt. Als het oplaadstation niet op de oplader is aangesloten, moeten alle lampjes uitgaan.

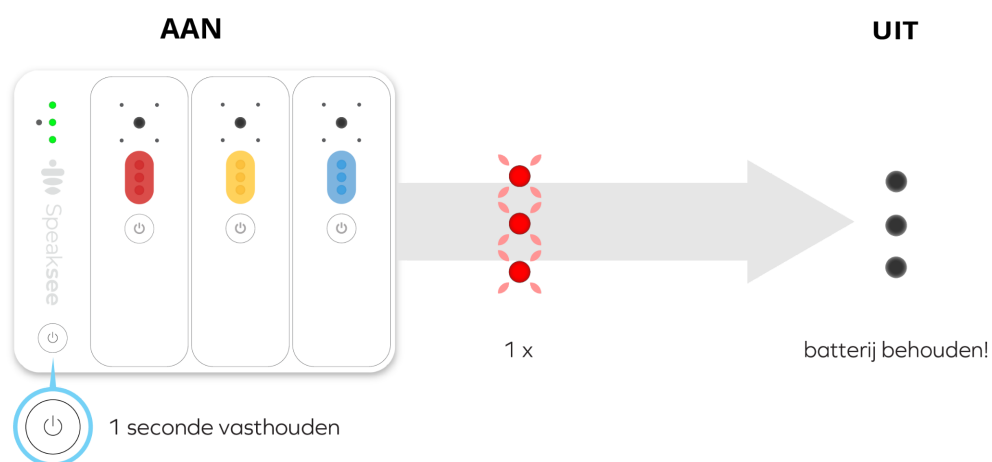

De Microphone Kit opladen

Tijdens het opladen lichten de lampjes wit op om de laadstatus van de batterij aan te geven.

LET OP: de Microphone Kit kan niet opladen in de volledig uit modus.

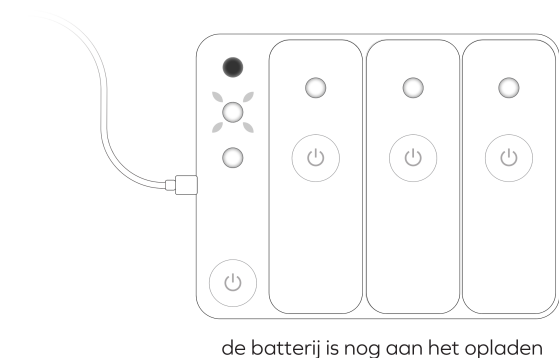


de batterij is nog aan het opladen

Aan het laden:

Als het oplaadstation aan het laden is knippert 1 van de lampjes in wit.

Het opladen van de microfoons wordt aangegeven door het continue branden van het lampje in wit.

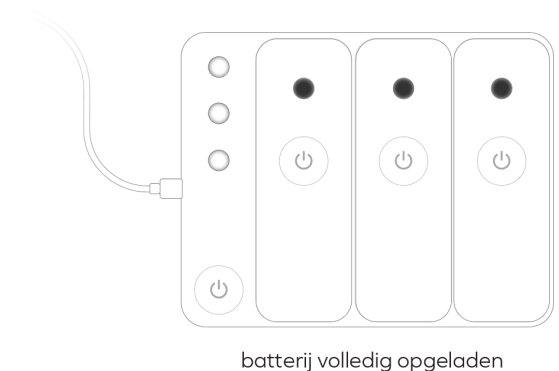

batterij volledig opgeladen

Batterij is vol:

Het oplaadstation is volledig opgeladen als de lampjes alle 3 continue wit branden.

Wanneer de microfoons volledig opgeladen zijn, zullen de lampjes juist uit blijven terwijl ze in het oplaadstation liggen.

Het oplaadstation opladen

Om het oplaadstation op te laden dienen de USB-C kabel en adapter verbonden te worden zoals omschreven in het hoofdstuk over de [oplaad accessoires](#).

TIP: Het oplaadstation kan ook worden opgeladen tijdens gebruik!

LET OP: laat de Microphone Kit niet op bij een omgevingstemperatuur hoger dan 35°C.

De microfoons opladen

De microfoons worden automatisch opgeladen bij terugplaatsing in het oplaadstation.


LET OP: De microfoons worden niet opgeladen wanneer het batterijniveau van het oplaadstation te laag is.

Software updates

De software van uw Microphone Kit wordt automatisch actueel gehouden. Een update kan plaatsvinden tijdens het opstarten, waarbij de lampjes van het oplaadstation fuchsia oplichten. In dat geval: Laat de microfoons in het oplaadstation liggen, druk niet op de aan/uit-knop en sluit de oplader aan indien nodig. Een update kan 5 - 60 minuten duren.

Momenteel brengen wij elke 1 à 2 maanden software-updates uit. Wij informeren onze gebruikers vooraf via e-mail over alles wat zij over de update moeten weten.

Hieronder vind je een overzicht van het updateproces. Eerst zullen de lampjes op het oplaadstation constant paars oplichten. Na een paar minuten zullen ook de microfoons 1 voor 1 paars kleuren, wat aangeeft dat de microfoons aan het updaten zijn. Zodra de update is voltooid, wordt de Microphone Kit opnieuw opgestart en worden de lampjes groen.

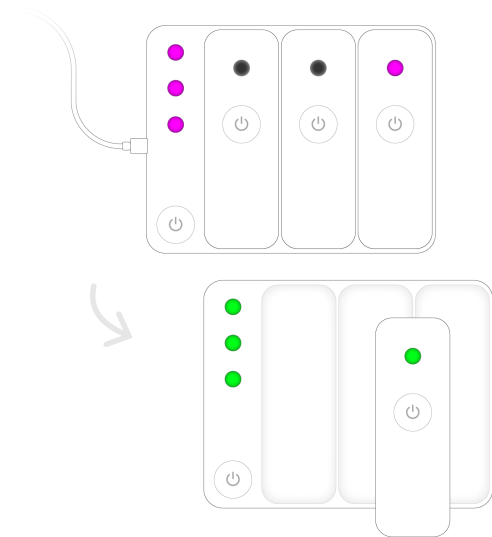

De microfoons updaten nu 1 voor 1.
Als het klaar is worden de lampjes groen

App updates

Zorg ervoor dat onze app geupdate is naar de meest recente versie. We zijn altijd bezig met verbeteringen!

INSTELLINGEN AANPASSEN


Leesbaarheid aanpassen

Lettergrootte en kleur thema

Druk op het menu icoontje in de rechterbovenhoek van het scherm. Dit opent het instellingenmenu. Selecteer hier "Accessibility".


Sleep de balk voor de lettergrootte naar links of rechts om de tekst van de transcripties kleiner of groter te maken.

Selecteer een thema om de transcripties naar eigen voorkeuren weer te geven. Je kunt kiezen tussen "Color" en "Glow".

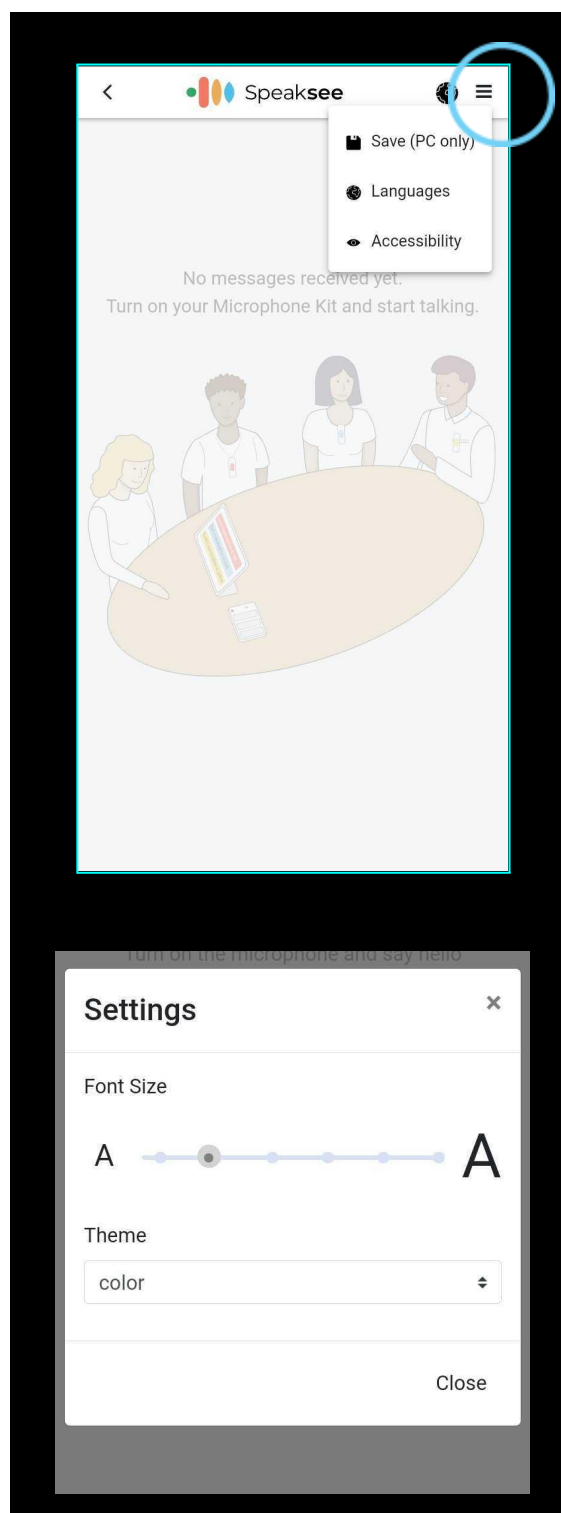

Vertalen

Druk op het menu-icoon in de rechterbovenhoek van het scherm. Dit zal het instellingenmenu openen. Hier kunt je "Languages" selecteren.

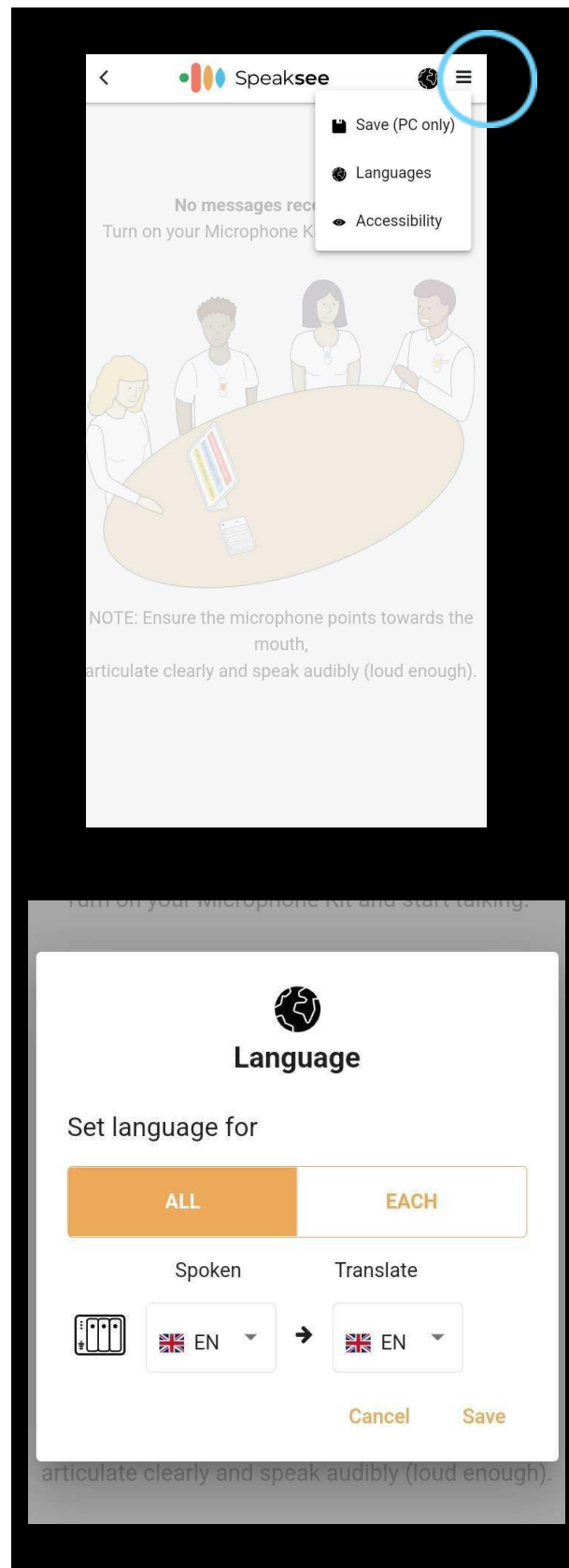



In dit menu kunt je zowel de invoer- als de uitvoertaal van de tekst selecteren. Als je niet wil dat de uitvoer taal wordt vertaald, dan houd je de taal gelijk aan de spreektaal.

Op het tabblad "each" kun je voor elke microfoon afzonderlijk de specifieke in- en uitvoer taal instellen.


Extra Wi-Fi-netwerken toevoegen

Druk op de instellingen knop in het menu van de Speaksee app en druk dan op "Nieuw Wi-Fi netwerk toevoegen".


Om de Microphone Kit te kunnen verbinden met een nieuw Wi-Fi netwerk, moet Bluetooth aan staan. **Let op: Android gebruikers moeten ook hun locatie inschakelen.**

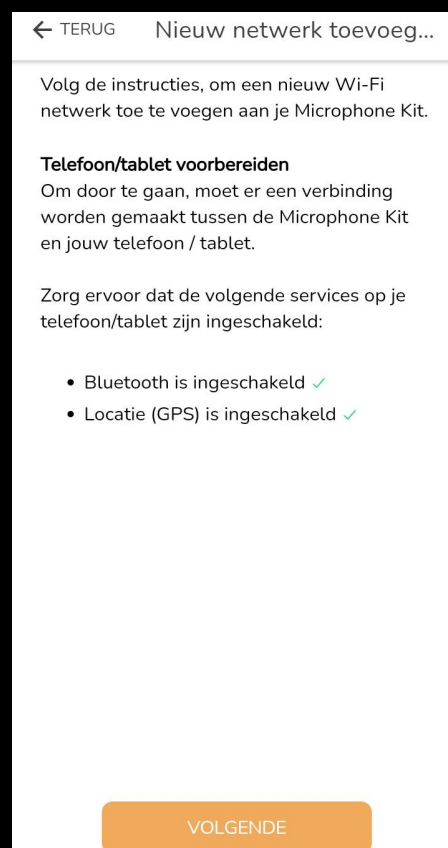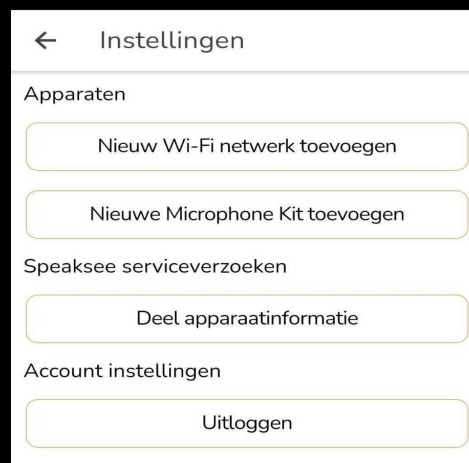


Om een nieuw Wi-Fi netwerk toe te voegen, moet het oplaadstation handmatig in de Bluetooth mode worden gezet. Druk eerst het oplaadstation aan. De lampjes beginnen groen te knipperen. Druk vervolgens 2x achter elkaar op de aan/uit knop. Je ziet nu 3 blauwe knipperende lampjes. Je kunt nu op volgende drukken.

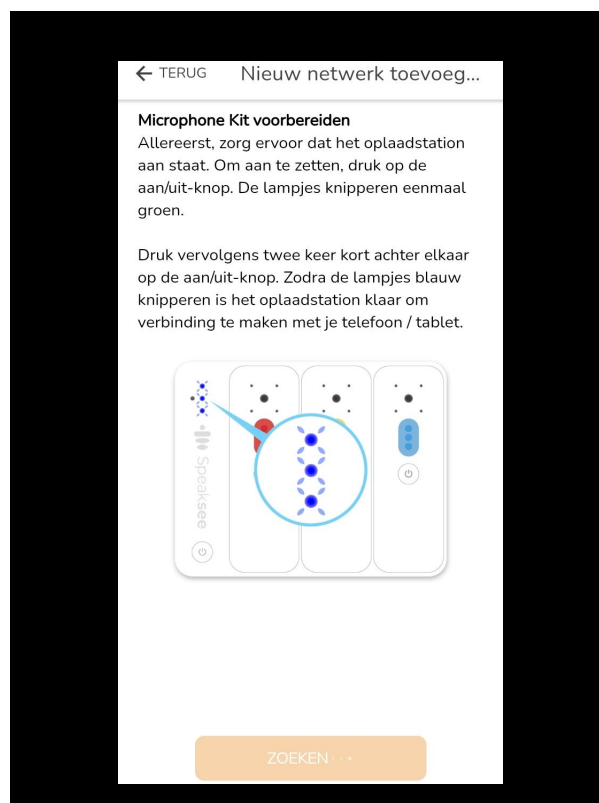

Wanneer je Microphone Kit is gevonden in de app, kun je op verbind drukken. Je kunt op het volgende scherm een Wi-Fi netwerk selecteren.

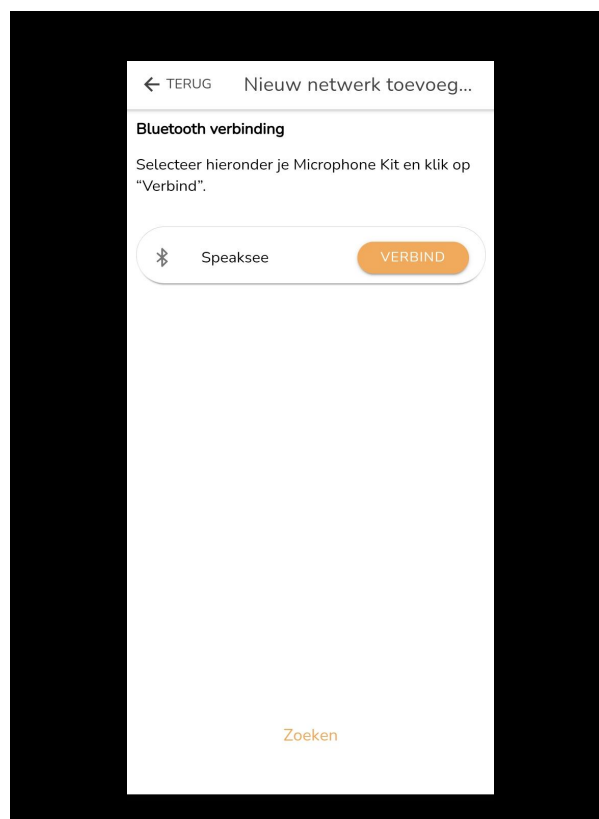

Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken met de Speaksee Microphone Kit. Vul de juiste Wi-Fi gegevens in en druk op "Verbind". Kan de app het gewenste netwerk niet vinden? Druk dan op "Scan opnieuw". Als de app na 3 pogingen nog steeds je netwerk niet kan vinden, neem dan contact op met ons support team.

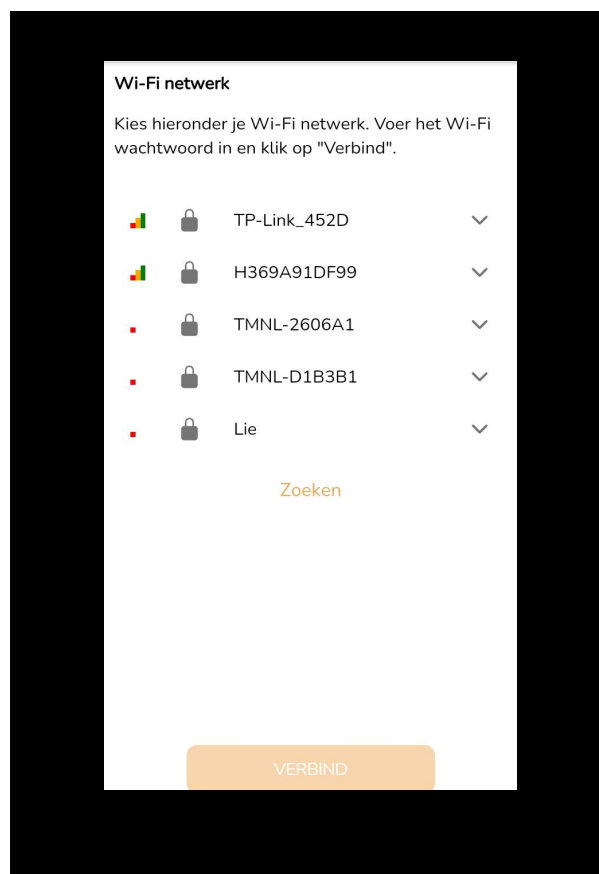

Zodra de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, branden de 3 lampjes op het oplaadstation continu groen en kun je jouw Microphone Kit gebruiken op het nieuwe Wi-Fi-netwerk.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Legenda van oplaadstation lampjes

Status	Omschrijving	Kleur en interval	
	Uit	Het oplaadstation is uitgeschakeld.	Alle 3 de lampjes zijn uit.
	Bluetooth (BLE) mode	Het oplaadstation wacht op een Bluetooth-verbinding met een telefoon of tablet, zodat een nieuw Wi-Fi netwerk kan worden gekoppeld.	Alle 3 de lampjes knipperen langzaam blauw (2 seconden aan, 1 seconde uit).
	Verbonden via Bluetooth (BLE)	Het oplaadstation is via Bluetooth met succes verbonden met een telefoon of tablet.	Alle 3 de lampjes zijn constant blauw.
	Software Update	De Microphone Kit is een update aan het downloaden en installeren.Laat de microfoons in het laadstation totdat de update is voltooid, wat wordt aangegeven door het uitschakelen van het laadstation.	Alle 3 de lampjes zijn constant fuchsia (roze/paars).
	Update mislukt	Er is een fout opgetreden bij het downloaden of installeren van de update. Zorg voor een stabiele internetverbinding en laat de microfoons in de dock staan. Als het blijft mislukken, neem dan contact op met support@speak-see.com.	Alle 3 de lampjes knipperen snel fuchsia (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit).
	Apparaat aangezet	De aan/uit-knop wordt ingedrukt) en het oplaadstation wordt aangezet.	1 knippering van alle 3 de lampjes in groen.
	Klaar voor gebruik	De batterij is tussen 70-100%.	Alle 3 de lampjes branden in groen.
	Het oplaadstation is klaar om audio te streamen naar de Speaksee clouddienst.	De batterij is tussen 40-69%.	Het bovenste lampje is uit. De middelste en onderste lampjes zijn constant groen.

		De batterij is tussen 15-39%.	De bovenste en middelste lampjes zijn uit. Het onderste lampje is constant groen.
		De batterij zal binnenkort leeg zijn, plaats de microfoons terug op het oplaadstation. De batterij is tussen 10-14%.	De bovenste en middelste lampjes zijn uit. Het onderste lampje is afwisselend groen en rood (3 seconden groen, 150 ms rood).
		De batterij is volledig opgeladen.	Alle 3 de lampjes zijn constant groen.
	Opladen terwijl het aan staat Het oplaadstation is aan het opladen (aangesloten op een stroomvoorziening) en klaar om audio te streamen naar de Speaksee clouddienst.	De batterij wordt opgeladen tussen 70-99%.	Het bovenste lampje knippert groen (1 seconde aan, 1 seconde uit). De middelste en onderste lampjes branden constant groen.
		Opladen van de batterij tussen 40-69%.	Het bovenste lampje is uit. Het middelste lampje knippert groen (1 seconde aan, 1 seconde uit) en het onderste lampje brandt constant groen.
		Opladen van de batterij tussen 0-39%.	De bovenste en middelste lampjes zijn uit. Het onderste lampje knippert groen (1 seconde aan, 1 seconde uit).
	Opstarten	Het oplaadstation wordt aangezet, maakt verbinding met Wi-Fi en controleert op updates. Dit duurt ongeveer 30 seconden, of langer met meerdere Wi-Fi-netwerken.	Alle 3 de lampjes knipperen langzaam groen (2 seconden aan, 1 seconde uit).
	Opladen terwijl het uitgeschakeld is (in standby)	Het oplaadstation is volledig opgeladen.	Alle 3 de lampjes zijn constant wit.
		Het oplaadstation laadt op en de batterij is tussen 70-99%.	Het bovenste lampje knippert wit (1 seconde aan, 1 seconde uit). Het middelste en onderste lampje blijven wit branden.
		Het oplaadstation is aan het opladen en de batterij is tussen 40-69%.	Het bovenste lampje is uit. Het middelste lampje knippert wit (1 seconde aan, 1 seconde uit) en het onderste lampje is constant wit.

		Het laadstation wordt opgeladen en de batterij is tussen 0-39%.	Het bovenste en middelste lampje zijn uit. Het onderste lampje knippert wit. (1 seconde aan, 1 seconde uit).
	Geen batterij	De batterij is te leeg om in te schakelen, bij het indrukken van de aan/uit knop blijft het oplaadstation uit/ in stand-by	Het bovenste en middelste lampje blijven uit. 1 flits van het onderste lampje in rood.
	Batterij leeg	Het oplaadstation is uitgeschakeld. De batterij is minder dan 10%.	Het bovenste en middelste lampje zijn uit. Het onderste lampje knippert snel in het rood (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit).
	Fatale fout	Er is een fout opgetreden of het oplaadstation is oververhit geraakt. Probeer het uit en weer aan te zetten. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met support@speak-see.com .	Alle 3 de lampjes wisselen snel tussen rood en wit (0,3 seconden rood, 0,3 seconden wit).
	Volledig uitgezet	Het apparaat is uitgezet.	Alle 3 de lampjes geven 1 flits in rood.
	Verbinding verloren	De internetverbinding is verbroken of er is geen communicatie met de Speaksee cloud. Controleer jouw Wi-Fi en zet het uit en weer aan. Als dit blijft gebeuren, neem dan contact op met support@speak-see.com .	Alle 3 de lampjes knipperen snel oranje (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit).
	Fabrieksreset geactiveerd	Fabrieksreset is handmatig geactiveerd door de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt te houden bij het inschakelen.	1 flits van alle 3 de lampjes in turkoois (lichtblauw).
	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Het wissen van alle gebruikersgegevens, inclusief: Wi-Fi-gegevens, logboeken, gekoppelde microfoons, sprekers namen enz.	Alle 3 de lampjes knipperen langzaam turkoois (2 seconden aan, 1 seconde uit).

Legenda van het microfoon lampje


	Status	Omschrijving	kleur en interval
	Uit	De microfoon is uitgeschakeld in stand-by of volledig uitgezet	uit.
	Niet gekoppeld	De microfoon is ingeschakeld en wacht om aan een oplaadstation te worden gekoppeld.	Knippert langzaam blauw (2 seconden aan, 1 seconde uit).
	Bevestiging koppeling	De microfoon is met succes gekoppeld aan een oplaadstation door hem in het oplaadstation te plaatsen terwijl het oplaadstation is ingeschakeld. Zorg ervoor dat er van tevoren een fabrieksreset is uitgevoerd op het oplaadstation.	1 flits in blauw.
	Updaten	De Microphone Kit is bezig met het downloaden en installeren van een update. Laat de microfoons in het oplaadstation totdat de update is voltooid, wat wordt aangegeven door het uitschakelen van het oplaadstation.	Constant fuchsia (roze/paars).
	Updaten mislukt	Er is een fout opgetreden bij het downloaden of installeren van de update. Zorg voor een stabiele internetverbinding en laat de microfoons in het oplaadstation liggen. Als het blijft mislukken, neem dan contact op met support@speak-see.com .	Snel knipperend fuchsia (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit). Ingeschakeld
	Aanzetten	De aan/uit-knop is ingedrukt en de microfoon is ingeschakeld.	1 flits in groen.
	Klaar voor gebruik	De batterij is tussen 15-100%.	Constant groen.
	De microfoon is klaar om audio te versturen naar het oplaadstation.	De batterij zal binnenkort leeg zijn, plaats de microfoon terug in het oplaadstation. De batterij is tussen 10-14%.	Afwisselend groen en rood (3 seconden groen, 150 ms rood).
	Opstarten	De microfoon wordt aangezet en verbonden met het oplaadstation. Dit duurt ongeveer 10 seconden.	Langzaam groen knipperend (2 seconden aan, 1 seconde uit).
	Opladen	De microfoon is op het oplaadstation geplaatst en volledig opgeladen.	Uit.
	De microfoon wordt opgeladen terwijl hij uit staat (in stand-by).	De microfoon wordt opgeladen in het oplaadstation en de batterij is tussen 0-99%	Constant wit.

	In het oplaadstation geplaatst	De microfoon is met succes in een oplaadstation geplaatst en daardoor naar stand-by geschakeld.	1 flits in het wit.
	Batterij te leeg	De batterij is te leeg om aan te zetten, bij het indrukken van de aan/uit knop blijft de microfoon uit.	1 flits in het rood.
	Battery leeg	De microfoon is volledig uitgeschakeld. De batterij is minder dan 10%.	Snel knipperend rood (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit).
	Fatale fout	Er is een fout opgetreden of de microfoon is oververhit. Probeer hem uit en weer aan te zetten. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met support@speak-see.com.	Snel afwisselend rood en wit (0,3 seconden rood, 0,3 seconden wit).
	Uitgezet	Uitzetten geactiveerd door de aan/uit-knop in te drukken.	1 flits in rood
	Verbinding verbroken	De microfoon kan geen verbinding maken met het oplaadstation.. Zorg ervoor dat het oplaadstation is ingeschakeld en dichtbij is. Als dit probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met support@speak-see.com.	Snel knipperend oranje (0,3 seconden aan, 0,3 seconden uit).
	Fabrieksreset geactiveerd	Fabrieksreset is handmatig geactiveerd door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden bij het inschakelen.	1 opname in turkoois (lichtblauw).
	Terugzetten naar fabrieks-instellingen	Wissen van alle gebruikersgegevens, inclusief: logboek, gekoppeld laadstation, enz.	Langzaam knipperend turquoise (2 seconden aan, 1 seconde uit).

Legenda aan/uit-knop bediening

Doelstelling	Omschrijving	Indrukking		Terugkoppeling
Aanzetten	Houd de knop ingedrukt om de Microphone Kit aan te zetten.	1 seconde		De lampjes knipperen 1 maal in groen om het aanzetten te bevestigen.
Uitzetten	Houd de knop ingedrukt om het apparaat uit te zetten.	1 seconde		De lampjes knipperen 1 maal in rood om het aanzetten te bevestigen.
Toevoegen van een Wi-Fi netwerk	Om een Wi-Fi netwerk toe te voegen moet de bluetooth verbinding opnieuw tot stand worden gebracht met een telefoon/tablet. Druk 2 maal achter elkaar op de aan/uit-knop terwijl het oplaadstation aan staat. LET OP: dit geldt alleen voor het oplaadstation.	Dubbel klikken		De lampjes beginnen langzaam blauw te knipperen.
Fabrieksreset	Zorg dat de Microphone Kit uit staat en houd vervolgens de aan/uit-knop minimaal 15 seconden lang ingedrukt.	15 seconden lang indrukken		De lampjes beginnen te knipperen in turquoise.

Apparaat Informatie delen

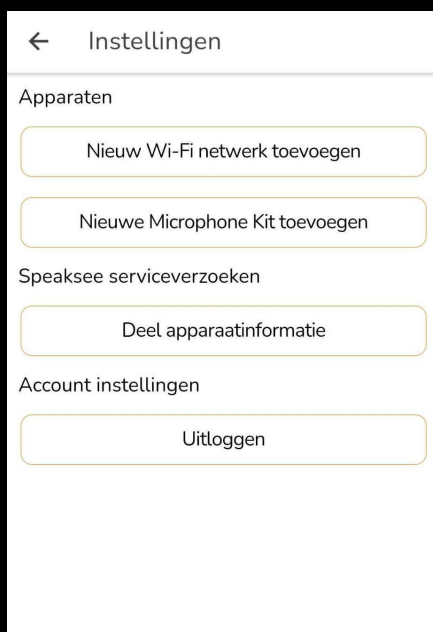


Druk op de instellingen knop in het menu van de Speaksee-app en druk vervolgens op "Deel apparaatinformatie".




Om de Microphone Kit aan je telefoon of tablet te koppelen, moet Bluetooth ingeschakeld zijn. **Let op: Android-gebruikers moeten ook hun locatie inschakelen.**



Om de apparaatinformatie te delen, moet het oplaadstation handmatig in Bluetooth-modus worden gezet. Schakel eerst het oplaadstation in. De lampjes beginnen groen te knipperen. Druk vervolgens dubbel op de aan/uit-knop. Je zult 3 blauwe knipperende lampjes zien. Je kunt nu op volgende drukken.

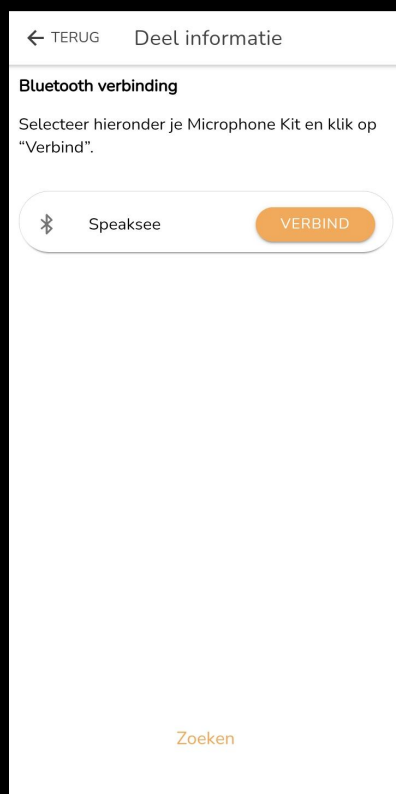

Wanneer je Microphone Kit is gevonden in de app, kun je op "verbind" drukken.

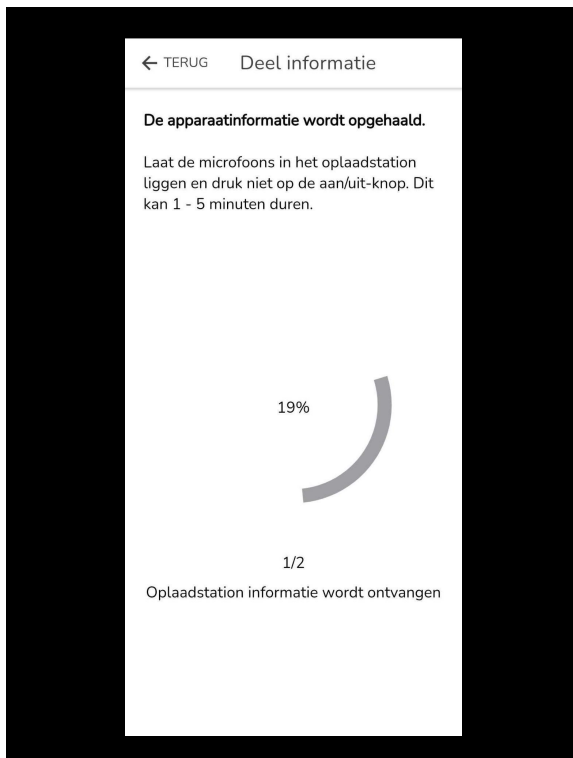


Je Microphone Kit deelt nu de apparaat informatie met de Speaksee-servers. Houd er rekening mee dat er geen persoonlijke gegevens, zoals gespreksinformatie, worden verzonden. Druk tijdens dit proces niet op knoppen in de app of op het oplaadstation.



De apparaat informatie is gedeeld. Je kunt nu op "Afronden" drukken en je wordt teruggebracht naar het instellingenmenu.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Het is mogelijk om alle gebruikersdata en informatie van de Microphone Kit te wissen door een reset uit te voeren.

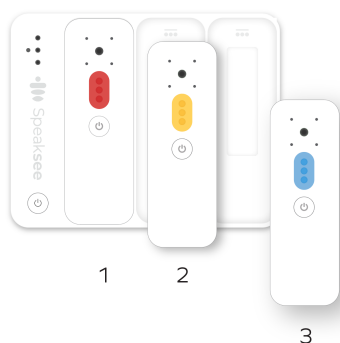

Let op: Plaats bij het uitvoeren van een fabrieksreset de microfoons altijd in de volgende volgorde (van links naar rechts) in het oplaadstation: Rood, geel, blauw. Omdat het veranderen van sprekers kleuren momenteel niet wordt ondersteund.

Het is mogelijk om alle gebruikersdata en informatie van de Microphone Kit te wissen door een reset uit te voeren.



Voor zowel het oplaadstation als de microfoons geldt dat je een fabrieksreset kan initiëren door de aan/uit-knop 15 seconden lang ingedrukt te houden bij het inschakelen (vanuit Standby of volledig uit modus). De lampjes zullen langzaam gaan knipperen in turquoise. Het terugbrengen naar de fabrieksinstellingen duurt slechts 15 seconden. Waarna het apparaat automatisch wordt uitgezet in standby.

Reset van het oplaadstation

Wi-Fi netwerk gegevens, logboeken, informatie over gekoppelde microfoons en kleuren.

Reset van de microfoons

Apparaat Informatie en gekoppelde oplaadstations.

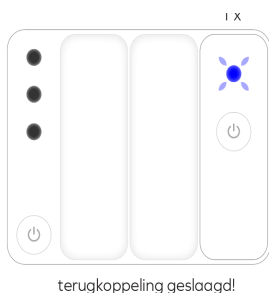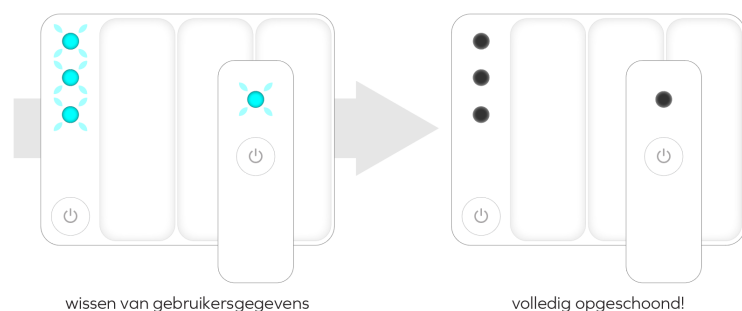

Het oplaadstation en de microfoons opnieuw koppelen

Nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld, moeten het oplaadstation en de microfoons opnieuw worden gekoppeld. De microfoons worden gekoppeld door ze terug te plaatsen in het oplaadstation. Het microfoon lampje knippert eenmaal donkerblauw om de koppeling te bevestigen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Oplaadstation	Microfoons, 3 stuks totaal
Uitgangen	USB-C, Audio, Ethernet	-
Knoppen	1 x aan/uit-knop	1 x aan/uit-knop
Sensoren	2 x microfoon	4 x microfoon, met een totale gerichte detectiehoek van 35 graden.
LED lampjes	3 x RGB kleuren LEDs	1 x RGB kleuren LED
Stroomtoevoer	5V, 2A (10W)	-
Batterij	1 x 3400 mAh Li-ion	1 x 440 mAh Li-ion
Formaat	Breedte: 12,5 cm Hoogte: 9,8 cm Dikte: 2,5 cm	
Gewicht	256 g	
Kleur	Wit	
In de verpakking	1 x oplaadstation, 3 x microfoon, 9 x kleurenpuck, 3 x nekkoord, 1 x internationale adapter, 1 x USB-C kabel, 1 x opbergetui & documentatie. Optioneel: Wi-Fi hotspot.	
Draadloze verbindingen	802.11b/g/n (2.4 / 5 GHz) Single / Dual stream Wi-Fi Bluetooth Low Energy (BLE)	
Benodigheden	Wi-Fi internetverbinding of Ethernet-kabelverbinding Speaksee app op een slim apparaat (telefoon / tablet) met een iOS of Android besturingssysteem en Bluetooth Low Energy.	
Certificering	De Speaksee Microphone Kit is getest door SGS-laboratoria om te voldoen aan de veiligheidsnormen van de EU, het VK, de VS, Canada en Australië.	
Duurzaamheid	RoHS conform	

JURIDISCHE INFORMATIE

Algemene voorwaarden voor gebruik

Het gebruik van de Microphone Kit vereist de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden, die hier kunnen worden gevonden:

<https://speak-see.com/pages/termsandconditions>

Privacybeleid

Zorg ervoor dat iedereen die de Microphone Kit gebruikt ermee instemt dat zijn (audio)gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Speaksee, dat hier kan worden gevonden: <https://speak-see.com/pages/privacy-policy>

Regelgeving Informatie

De Microphone Kit voldoet aan de volgende regelgeving:

	EU declaration of conformity Speaksee B.V. declares that this Microphone Kit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
	FCC statement <u>15.21:</u> The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. <u>15.105(b):</u> This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <u>RF radiation exposure statement:</u> This equipment complies with FCC and IC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins 20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner

	avec ceux-ci. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare l'appareil (à l'exception du combiné) des utilisateurs. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Le présent appareil est conforme aux Partie 15 des règlements de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
	Canadian compliance statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
	UK compliance representative World Compliance Agency UK Ltd. 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ.
	Australia compliant This Microphone Kit complies with EESS (Electrical Equipment Safety System); and ACMA's requirements.
	WEEE label This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to the designated collection point for the recycling of the waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
	SGS energy efficiency This Microphone Kit meets the relevant standards and specifications, as well as performance requirements.

Belangrijk advies

Lees deze volledige gebruiksaanwijzing voordat je deze Microphone Kit gebruikt.

- **Beoogd gebruik**
De Microphone Kit is bedoeld om doven en slechthorenden te helpen bij gesprekken.
- **Opslag**
Verwijder voor gebruik de beschermende sticker op elk van de 3 microfoons.
- **Storage**
Bewaar de Microphone Kit in de bijgeleverde draagtas wanneer je hem niet gebruikt.
- **Vervoer**
Stel de Microphone Kit niet bloot aan mechanische schokken, bijvoorbeeld door hem te laten vallen.
- **Onderhoud**
Gebruik alleen een zachte droge doek om de Microphone Kit schoon te maken.

Voorzorgsmaatregelen

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht wanneer je de Microphone Kit gebruikt.

Elektrische schokken en hitte

- Stel deze Microphone Kit of de stroomvoorziening niet bloot aan water of extreme omstandigheden. Extreme omstandigheden zijn onder meer: extreem hoge of lage temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogten.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van de stroomvoorziening om elektrische schokken te voorkomen. Verdraai of plet de kabel niet. Gebruik het niet als de kabel of connectors gescheurd of beschadigd zijn.
- Gebruik voor het opladen van deze Microphone Kit uitsluitend de bijgeleverde voeding. Sluit hem niet aan op beschadigde of onveilige stopcontacten.
- Deze Microphone Kit kan tijdens het gebruik warm aanvoelen, dit is normaal.

Pacemakers en andere geïmplanteerde apparaten

Deze Microphone Kit bevat magneten en onderdelen die een elektromagnetisch veld uitstralen en interferentie kunnen veroorzaken met pacemakers of andere elektronische medische apparaten. Raadpleeg voor gebruik uw arts of de fabrikant van het medische apparaat over de vereiste minimale veilige afstand tussen deze Microphone Kit en uw medische apparaat.

Lithium ion batterij

De ingebouwde batterijen van de Microphone Kit mogen niet worden blootgesteld aan de volgende extreme omstandigheden of misbruik door de gebruiker:

- Vervanging van een batterij door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen.
- Het in vuur of een hete oven gooien van een batterij, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen, wat kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk die kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

CONTACTGEGEVENS

We geven om je

Aarzel niet om contact op te nemen met Speaksee als je vragen of feedback hebt. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten te verbeteren.

Neem contact met ons op via support@peak-see.com of vul ons contactformulier in via: <https://peak-see.com/pages/contact>

De antwoorden op de meest gestelde vragen zijn te vinden op:
peak-see.com/help-center

Aanwezigheid op social media

- Instagram: https://www.instagram.com/peak_see/
- Facebook: <https://www.facebook.com/Speaksee>
- Twitter: https://www.twitter.com/peak_see
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/peaksee/>
- YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCQvGf%20iasHyUYZ42RhRsDAMg>

Kantoorlocatie

Speaksee, Westblaak 7G, 3012 KC Rotterdam, The Netherlands.